

全自動錠剤分包機

Xana series

TOSHO  
Your best pharmacy solution

# Xana-1360

# Xana-1360 IF

# Xana-2041

# Xana-2041 IF

奥行き

600mm  
省スペースモデル

分包速度

最速 54包/分  
当社規定フォームによる

錠剤コンベア

48マス  
マスマニュアル式



Xana-1360/ Xana-1360IF


## コンパクト

昨今調剤の現場では、省スペース化が求められています。お客様のニーズにお応えするため、D600(奥行き600mm)の省スペースにまとめました。



## 横型包装機

包装機部分は引き出し可能で分包紙の交換、清掃も簡単。上下ホッパーと引っ張り、送り出し機構の絶妙なバランスにより一包あたりの錠剤の量が増えても安定した分包が可能です。

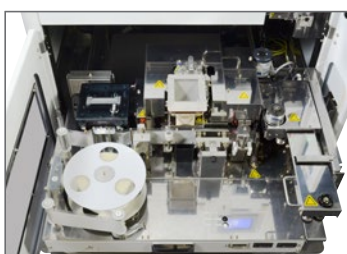

Xana-1360 Xana-1360IF

## 収納型ノート PC

お客様のニーズにお答えして調剤現場の省スペース化に対応。ノート PC は収納型なので分包機を使用しない時は奥行きをとりません。



Xana-1360IF Xana-2041IF

## IF (アイエフ) - Intelligent Feeder-

錠剤カセット誤挿入防止機能  
錠剤カセットの誤挿入による分包ミスをLED 警告で防止。警告に気がつかずに分包を開始しても、錠剤の切り出しをロックし誤分包を未然に防ぎます。



# 仕様

## 仕様項目

名称	全自動錠剤分包機			
型式	Xana-1360	Xana-1360IF	Xana-2041	Xana-2041IF
本体サイズ(mm)	W900×D600×H1960 (本体サイズにビスなどの突起物は含みません。)			
フロアプレートサイズ(mm)※	W900×D990			
本体重量(kg)	約380		約430	
電源	単相100V AC 15A			
電源周波数	50/60Hz			
最大消費電力(W)	900			
最大電流値(A)	9			
制御方法	分散CPU制御方式			
外部入力装置	ノートPC標準装備 T-Wave標準装備		デスクトップPC標準装備 T-Wave標準装備	
錠剤棚	カセット	ローターカセット		
	カセット数	136個搭載(Sサイズ×136個)		204個搭載(Sサイズ×204個)
	IF機能	—	標準搭載	—
最大投与日数	1~255日			
錠剤コンベア	48マス手動コンベアユニット			
予備撒きカセット	48マス手動式			
包装機構	横型包装機			
印字方式	全行・2行印字対応 熱転写方式			
WindowsFont機能	オプション対応(別費用) ※2行印字時は、30mmリボンをご使用ください ※D-545Fine(インクリボン)を推奨			
分包紙サイズ	W80×H70固定			
分包速度	54包/分(弊社測定フォームによる)			


※転倒防止用フロアプレートを標準装備。

添付品オプション ※オプションの詳細につきましては、弊社支店営業所へお問い合わせ下さい。


- ノイズカットトランス(分包機へのAC電源のノイズを軽減できます。)
- 予備撒きカセット(標準添付品1ヶの他に、別途ご注文頂けます。)
- 安定化電源

## 寸法 単位 [mm]

Xana-1360/Xana-1360IF

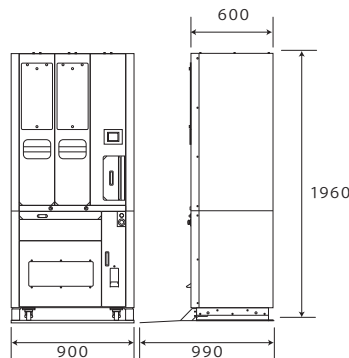

Xana-2041/Xana-2041IF

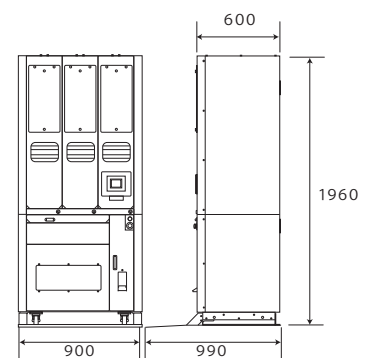

※Windows®はMicrosoftCorp.の登録商標です。

※改良のため、仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。 ※本カタログは印刷のため、実際の色と異なることがあります。